

СИЛОВОЙ КОМПЛЕКС ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

БИОНИК SYSTEM LIGHT

Ширина комплекса - 590 мм.
Ширина тяги - 800 мм.
Высота комплекса - 2300 мм.
Глубина комплекса - 350 мм.

Максимальный вес пользователя - 200 кг.

Перед установкой спортивного комплекса

- Проверить список комплектующих по таблице, которая изображена в инструкции.
- Подготовить инструмент (стремянка; 2 рожковых ключа 13, 17; строительный уровень).
- Освободите место (в зависимости от габарита спортивного комплекса).
- Не выбрасывайте упаковочный материал до окончания сборки.

Правила хранения

До установки в рабочее положение хранить комплекс в упаковке производителя в сухих закрытых помещениях.

Сборка спорткомплекса

Данный комплекс устанавливается только к несущим стенам на анкерные болты (10x80) или дюбель-гвозди (12x100 шуруп 8x100) в зависимости от структуры стены. Если стена бетонная, то крепить комплекс нужно анкерными болтами, если кирпичная, то дюбель-гвоздями. Необходимо 12 шт.

Для установки комплекса потребуется 1 человек. Начальную сборку следует проводить в горизонтальном положении.

1 ЭТАП: Берем основания для стержней (16) и соединяем с крепежом к стене нижним (2), используя болты и гайки (19, 23). Затем берем стержни (4) и устанавливаем прокладку для стопора (5) и стопор (6) на них.

2 ЭТАП: Берем стержни со стопорами и фиксируем с основанием для стержней (16) болтами (17).

3 ЭТАП: Берем блок для груза (3) и соединяем с соединительным крепежом (12) используя болты (20), затем собранную конструкцию одеваем на стержни (4). Далее соединяем с крепежом к стене верхним (1) болтами (17).

4 ЭТАП: Собираем трос (9) и ролик троса (10) с соединительным крепежом (12), используя болты и шайбы (18, 11). На тягу (8) устанавливаем цепь с карабинами (7) и соединяем с тросом (9).

После сборки необходимо выровнять все узлы комплекса.

После выравнивания необходимо протянуть все болты, гайки и установить все колпачки (21, 22, 26).

Комплекс готов к установке. Поднимите его и зафиксируйте к стене (для этого необходим 1 человек).

Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия «Формула здоровья» техническим требованиям при соблюдении покупателем правил сборки, эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется при нарушении правил сборки, эксплуатации и хранения, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

дата: _____ продавец: _____

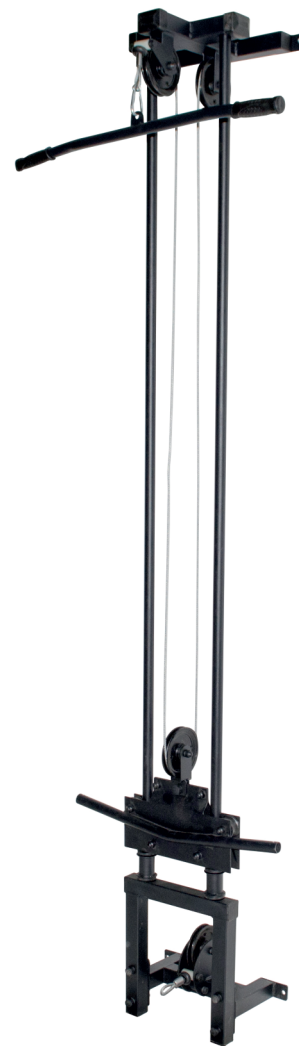


Схема общей сборки

№	ДЕТАЛЬ	КОЛ-ВО (шт. пар)
1	Крепеж к стене верхний	1
2	Крепеж к стене нижний	1
3	Блок для груза	1
4	Стержень	2
5	Прокладка для стопора	4
6	Стопор	2
7	Цепь с карабинами	1
8	Тяга	1
9	Трос	1
10	Ролик троса	1
11	Шайба пластмассовая	2
12	Соединительный крепеж	1
13	Одинарная ручка для тяги	1
14	Петля для тяги	1
15	Манжета	1
16	Основание для стержней	1
17	Болт М8х20	4
18	Болт М8х45	1
19	Болт М10х55	4
20	Болт М10х25	1
21	Колпачок М8 фигурный	1
22	Колпачок на болт, гайку М8	5
23	Гайка М10	5
24	Гайка М8самоконтрящаяся	1
25	Шайба М8	6
26	Колпачок М10	10
27	Шайба М10	10

